




Effectuer des pointés vidéos avec Generis 5+
Ouvrez le logiciel... Éventuellement, cliquez sur la caméra (capture d'écran page suivante) pour faire apparaître le mode vidéo.

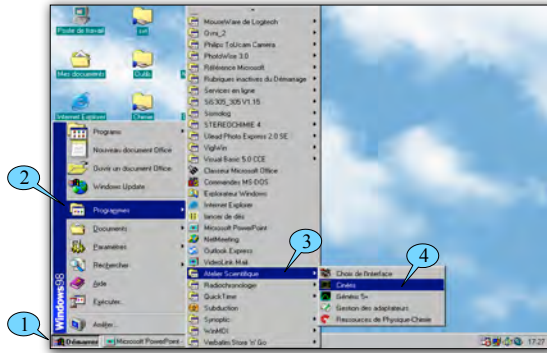


Sélectionnez l'onglet vertical « traitement manuel » (1) puis cliquez sur le symbole du dossier (2). Les vidéos sont stockées dans le dossier Doc vidéo.

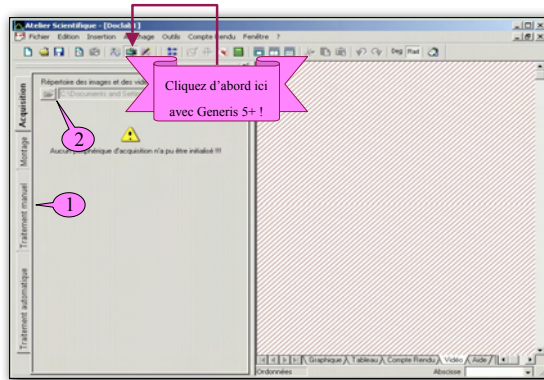


Il faut choisir une origine (1 et 2) et définir un repère orthonormé (3). Bien suivre les indications du logiciel...

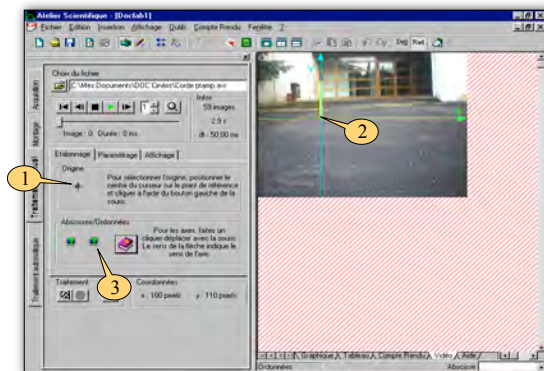


En général une règle permet un étalonnage horizontal, vertical ou oblique, par un cliqué-glissé. Cliquez ensuite sur le drapeau à damier pour le départ ! (3)

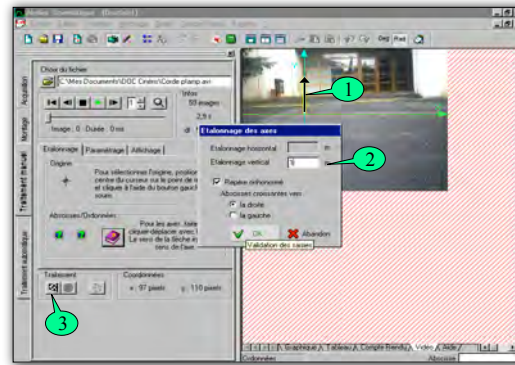


Pointé en cours...

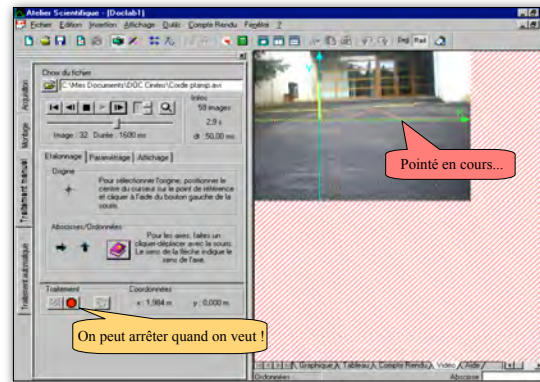


Accédez au tableau des valeurs et au graphique en cliquant sur les onglets en bas à droite (1 et 2). Cliquez ensuite sur « Modélisation » (3).

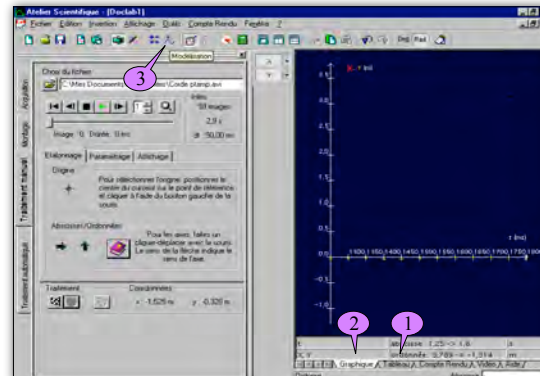

La modélisation est la partie primordiale du travail du Physicien. Si cela n'est pas fait, sélectionner la bonne grandeur à modéliser (1). Puis choisir un modèle (2).

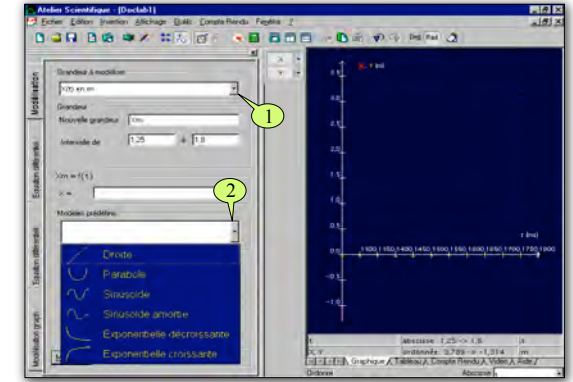

À ce stade, on peut faire apparaître ou disparaître des courbes pour mieux voir (1) ; cliquer sur le bouton « modéliser » (2), les paramètres modélisés sont indiqués au niveau de (3).

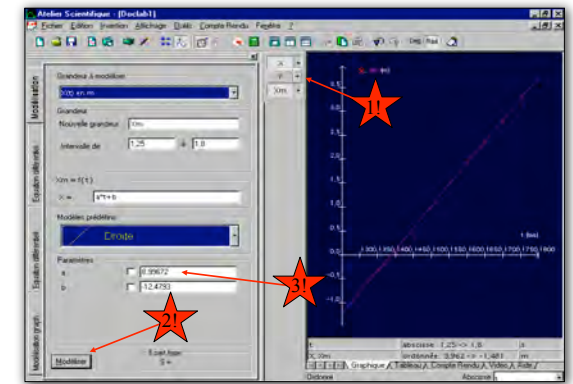

Cliquer sur (1) pour passer dans le mode « calcul », le choix du calcul s'effectue au niveau des onglets verticaux (2) (par exemple, « Dérivée »), le choix de la courbe au niveau de (3), le calcul est lancé par (4).

